

**BACCALAURÉAT GÉNÉRAL****Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie  
Évaluation des Compétences Expérimentales**

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

**ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT**

NOM :	Prénom :
Centre d'examen :	n° d'inscription :

Cette situation d'évaluation comporte **quatre** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

**CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION**

Le sel iodé est un sel alimentaire enrichi en iode, de façon à réduire les risques de carence en cet élément, indispensable à la production des hormones thyroïdiennes. Sa carence peut entraîner par exemple un retard de croissance et divers troubles mentaux.

Dans un régime alimentaire, de très faibles quantités d'iode suffisent à prévenir ces problèmes. Mais dans le monde, beaucoup de sols ne présentent que de faibles taux naturels en iode, et les légumes ne peuvent alors pas s'en enrichir suffisamment. C'est pourquoi la législation de nombreux pays, dont la France, impose ou autorise un ajout d'iode dans le sel commercial.



***Le but de cette épreuve est d'évaluer la teneur en iode d'un sel iodé.***


**INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT****Sel iodé**

L'iodation (enrichissement en iode) est autorisée en France depuis 1952 pour le sel de table et le sel de cuisine, mais elle n'est pas obligatoire. Le sel iodé doit contenir entre 15 et 20 mg d'iode par kg de sel.

Pour ioder un sel, on peut y ajouter de l'iodate de potassium, un solide contenant des ions iodate  $\text{IO}_3^-$ .

**Détermination de la teneur en iode d'un sel de cuisine**

Pour déterminer la teneur en élément iode d'un sel de cuisine, on fait réagir le sel iodé avec une solution d'iodure de potassium. La transformation qui a alors lieu peut être modélisée par l'équation suivante :

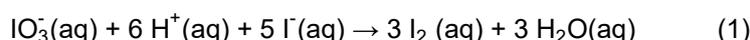

Le diiode formé lors de la réaction (1) est ensuite titré par une solution de thiosulfate de sodium de concentration en quantité de matière connue. La masse  $m_I$  d'iode (en gramme) contenue dans le sel analysé peut être déduite du volume à l'équivalence  $V_E$  de ce titrage grâce à la relation :

$$m_I = \frac{C \cdot V_E}{6} \cdot M(I)$$

avec  $C$  : concentration en quantité de matière de la solution titrante (en  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )  
 $V_E$  : le volume de solution titrante introduit à l'équivalence (en L)  
 $M(I)$  : la masse molaire de l'iode (en  $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )

**Données utiles**

L'empois d'amidon permet de détecter la présence de diiode  $\text{I}_2$  même en très faible quantité.  
En présence de diiode  $\text{I}_2$ , l'empois d'amidon donne au mélange une couleur bleu foncé.

Masse molaire de l'iode :  $M(I) = 126,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

**TRAVAIL À EFFECTUER****1. Préparation des solutions (30 minutes conseillées)****1.1. Préparation de la solution titrée**

Protocole de préparation du mélange **S** :

- Dans un erlenmeyer entouré de papier d'aluminium, introduire 10,0 g du sel de cuisine à analyser.
- Ajouter 50 mL d'eau distillée sous agitation.
- Ajouter 1 mL d'acide sulfurique de concentration  $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  puis 5 mL de solution d'iodure de potassium ( $\text{K}^+(\text{aq})$ ,  $\text{I}^-(\text{aq})$ ) à 10 %.
- Maintenir l'agitation à l'abri de la lumière pendant 10 minutes.

Mettre en œuvre le protocole permettant de préparer le mélange **S**.

**1.2. Préparation de la solution titrante**

Pour réaliser le titrage du diiode dans le mélange **S**, une solution de thiosulfate de sodium **S<sub>1</sub>** de concentration en quantité de matière  $C_1 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  est utilisée.



# SEL IODÉ

Session  
2023

Mettre en œuvre le titrage et noter la valeur du volume  $V_E$  de solution titrante versé à l'équivalence. L'équivalence est attendue entre 5 mL et 10 mL.

$V_E = \dots\dots\dots$

APPEL n°3		
	<b>Appeler le professeur pour lui présenter la valeur du volume équivalent obtenu ou en cas de difficulté</b>	

2.2. Détermination de la masse d'élément iode présent dans le sel iodé

Calculer la masse d'iode contenu dans l'échantillon de sel de cuisine utilisé.

.....  
.....

Identifier quelques sources d'incertitude sur cette valeur obtenue.

.....  
.....  
.....

Le sel de cuisine utilisé est-il conforme à la législation française ?

.....  
.....  
.....

**Défaire le montage et ranger la pailasse avant de quitter la salle.**